
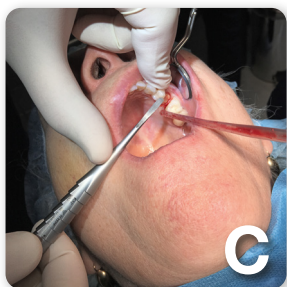
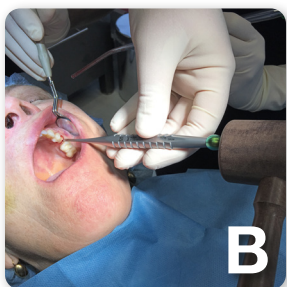


Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

H-Tool Set
nach Dr. Hildebrand

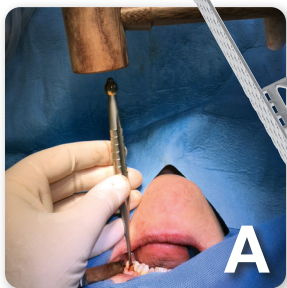

17.009.00

H-Tool Set
nach Dr. Hildebrand

ZEPF | *dental*
newsticker






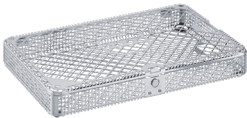


H-Tool Set

nach Dr. Hildebrand

Die neuen H-Tools, entwickelt mit Dr. Hildebrand, sind eine Fortsetzung des erfolgreichen X-Tool-Konzeptes. Die Instrumentenspitzen sind sehr flach und scharf auslaufend. Die Instrumente werden längs der Wurzelachse eingefügt und das Alveolarfach aufgedehnt, indem die H-Tools mit leichten Hammerschlägen nach apikal entlang der Wurzel des zu extrahierenden Zahnes vorgetrieben werden.

Der leichte Ferrozell-Hammer mit einem Durchmesser von 35 mm erlaubt hier ein sicheres, geführtes Arbeiten. Bedingt durch die leichte Bauweise dieses Hammers ist das Empfinden beim Patienten deutlich weniger unangenehm, als wenn ein Hammer mit harten Kunststoffeinsätzen oder im WorstCase mit Metallkopf Verwendung findet.

Inhalt: H-Tool Set

Abbildung	Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	17.009.00 H-Tool Set nach Dr. Hildebrand im Waschkorb, inkl. Ferrozell-Hammer und H-Tools bestehend aus:	1 Set
	41.503.01 Hammer aus Ferrozell Kopf Ø 35 mm, 100 g, Gesamtgewicht 180 g, 250 mm lang, passend für Waschkorb	1 Stück
	17.009.01 H-Tool # 1, gerade, Arbeitsende 2,5 mm, grün	1 Stück
	17.009.02 H-Tool # 2, gerade, Arbeitsende 3,5 mm, grün	1 Stück
	17.009.05 H-Tool # 5, gerade, Arbeitsende 3,0 mm, gold	1 Stück
	85.195.00 Waschkorb in der Größe 1/1 als Träger für die restlichen Komponenten	1 Stück
	85.181.04 Instrumentenauflage hoch, universal 130 mm / 8 Aufnahmen	2 Stück
	85.181.05 Instrumentenauflage hoch, universal 81 mm / 5 Aufnahmen	2 Stück

