

LANGER Universal-Kürette # L 17/18
im ZEPF **BIONIK** Griff



24.207.17L



LANGER Universal-Kürette # L 17/18

im **ZEPF BIONIK** Griff


Die neue Langer Kürette # L 17/18 verfügt über die gleiche Biegung wie die Gracey # GRA 17/18 und ist die perfekte Ergänzung zu unserem Universal-Küretten Sortiment.

Im Gegensatz zu den Gracey-Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeitsenden / Schneidkanten, so dass Konkremete am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können.

Die 3-fach-Biegung der Arbeitsenden ermöglicht einen optimalen Zugang speziell im distalen Prämolaren- und Molarenbereich sowie bei eingeschränkter Mundöffnung.

Die **ZEPF BIONIK** Griffe wurden nach ergonomischen Erkenntnissen optimal für die Kürettage gestaltet.

QUICKFIX

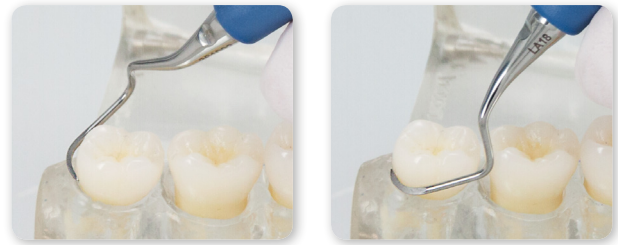

24.751.117L

24.751.118L

8-4	4-8
8-4	4-8

24.207.17L

Langer # L 17/18, Universal-Kürette für obere und untere Molaren und Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff kobaltblau, Einsätze auswechselbar

Optional:

Bei Verwendung der Universal-Kürette Langer # L 5/6 (24.201.05L) für den Ober- und Unterkiefer im Frontzahnbereich zusammen mit der neuen Langer # L 17/18 (24.207.17L) werden alle Zähne von 1-8 im Ober- und Unterkiefer abgedeckt.



24.751.105L

24.751.106L

3-1	1-3
3-1	1-3

24.201.05L

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette für Frontzähne im Ober- und Unterkiefer, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, Einsätze auswechselbar

BIONIK ZEPF



reddot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich.

Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.

AESTHETIC IS THE RESULT