

LANGER Universal-Küretten in den Ausführungen:

Standard | Titan | M5 | M5 mit nanopal®-Beschichtung | Fein | Fein mit nanopal®-Beschichtung  
im ZEPF BIONIK Griff



**BIONIK**<sup>ZEPF</sup>




reddot design award  
winner 2010


## Langer Universal-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff


Im Gegensatz zu den Gracey Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Mit den 3 Figuren (Langer 1/2, 3/4 und 5/6) kann die Prophylaxebehandlung an allen Quadranten effizient erfolgen.

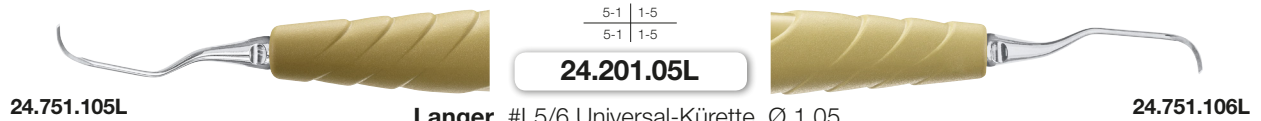

**Langer**, #L5/6 Universal-Kürette, Ø 1,05,  
für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar

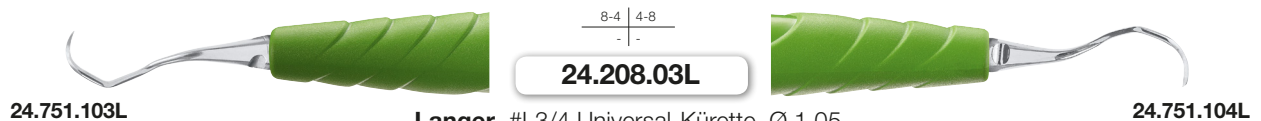

**Langer**, #L3/4 Universal-Kürette, Ø 1,05,  
für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar

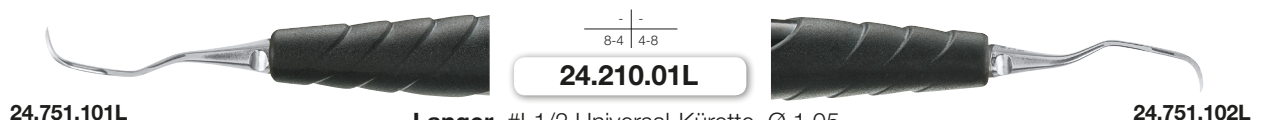


**Langer**, #L1/2 Universal-Kürette, Ø 1,05,  
für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar



## Langer Universal Titan-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff


Die Langer Küretten mit Titan-Einsätzen eignen sich hervorragend zur Entfernung von angelagerten Plaqueschichten auf den Implantathälsen. Durch das Titan-Material wird die Oberfläche des Implantates nicht beschädigt.

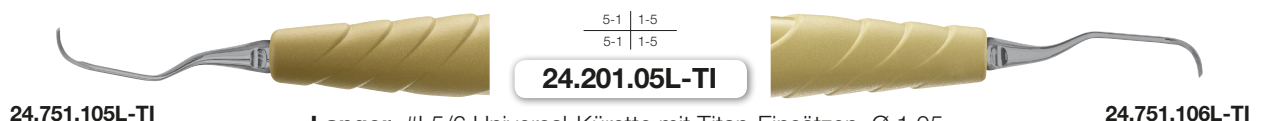

**Langer**, #L5/6 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,  
für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar





**Langer**, #L3/4 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,  
für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar

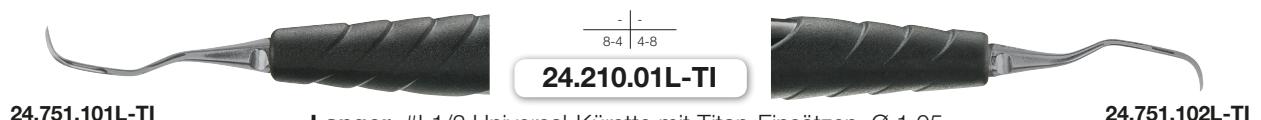

**Langer**, #L1/2 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,  
für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar

## Langer M5 Universal-Küretten im ZEPF BIONIK Griff

Die neuen Zepf Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet. Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz.

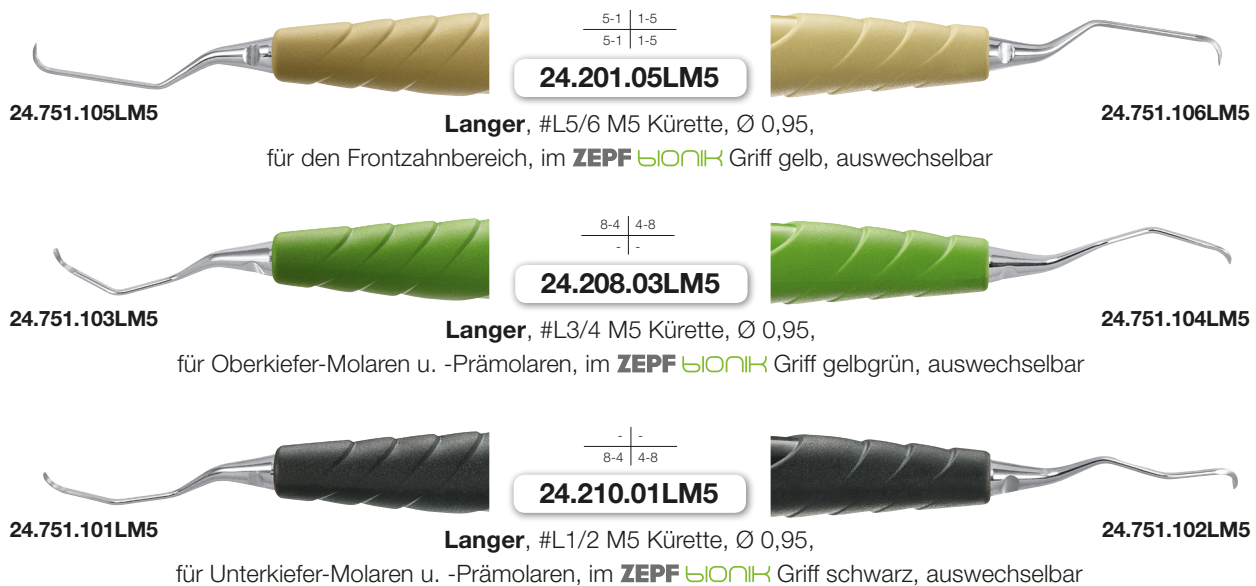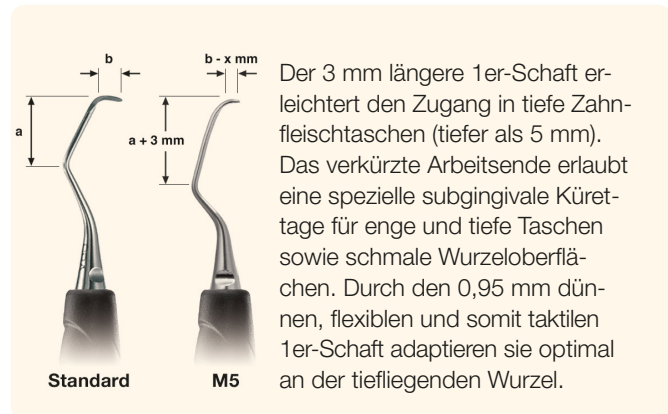

## Langer M5 Universal-Küretten mit nanopal®-Beschichtung im ZEPF BIONIK Griff

Die schwarz beschichteten ZEPF nanopal®-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte Oberfläche, die in ihrer kristallinen Nanostruktur sehr aggressiv und scharfkantig ist. Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekannte **4500 Vickers** erhöht.

Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht nach jeder Kürettage geschärft zu werden.

Die schwarze, kratzfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen.



## Langer Universal-Küretten, feine Ausführung

im **ZEPF BIONIK** Griff

Analog zu den Standard Langer Universal-Küretten haben auch die feinen Ausführungen zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an den Zahnhälsen.



## Langer Universal-Küretten, feine Ausführung mit nanopal®-Beschichtung

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die schwarz beschichteten **ZEPF nanopal®**-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte Oberfläche, die in ihrer kristallinen Nanostruktur sehr aggressiv und scharfkantig ist. Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekannte **4500 Vickers** erhöht.

Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht nach jeder Kürettage geschärft zu werden.

Die schwarze, kratzfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen.



AESTHETIC IS THE RESULT