

Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

LANGER Universal-Küretten in den Ausführungen:

Standard | Titan | M5 | M5 mit nanopal®-Beschichtung | Fein | Fein mit nanopal®-Beschichtung
im ZEPF BIONIK Griff



BIONIK^{ZEPP}



reddot design award
winner 2010

ZEPF dental
newsticker

Langer Universal-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff

Im Gegensatz zu den Gracey Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkreme am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Mit den 3 Figuren (Langer 1/2, 3/4 und 5/6) kann die Prophylaxebehandlung an allen Quadranten effizient erfolgen.




24.751.105L

Langer, #L5/6 Universal-Kürette, Ø 1,05,

24.751.106L

für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar

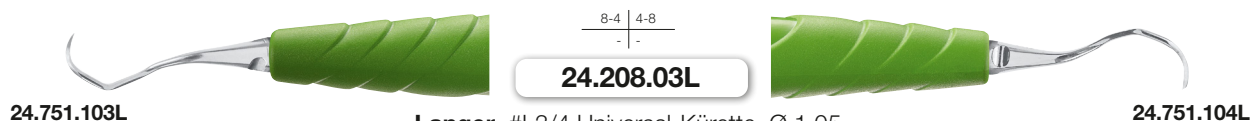


24.751.103L

Langer, #L3/4 Universal-Kürette, Ø 1,05,

24.751.104L

für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar

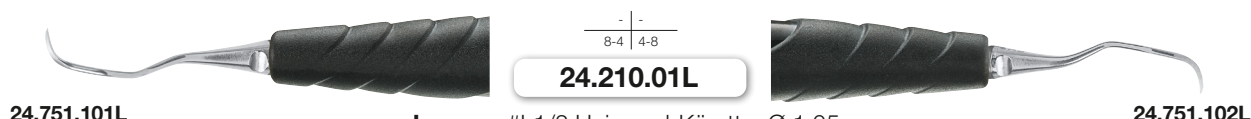

24.751.101L

Langer, #L1/2 Universal-Kürette, Ø 1,05,

24.751.102L


für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar



Langer Universal Titan-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die Langer Küretten mit Titan-Einsätzen eignen sich hervorragend zur Entfernung von angelagerten Plaqueschichten auf den Implantathälsen. Durch das Titan-Material wird die Oberfläche des Implantates nicht beschädigt.

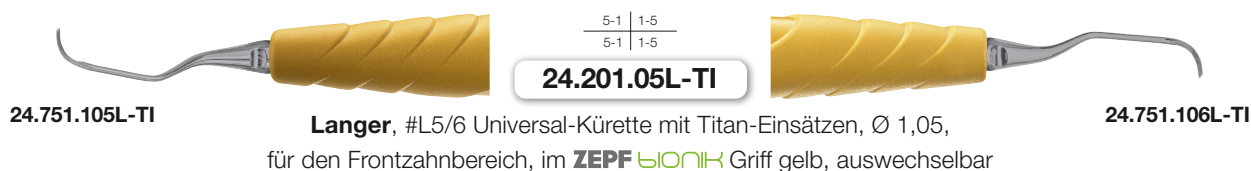

24.751.105L-TI

Langer, #L5/6 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,

24.751.106L-TI

für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar



24.751.103L-TI

Langer, #L3/4 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,

24.751.104L-TI

für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar



24.751.101L-TI

Langer, #L1/2 Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05,

24.751.102L-TI


für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar

Langer M5 Universal-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die neuen Zepf Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet.

Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz.

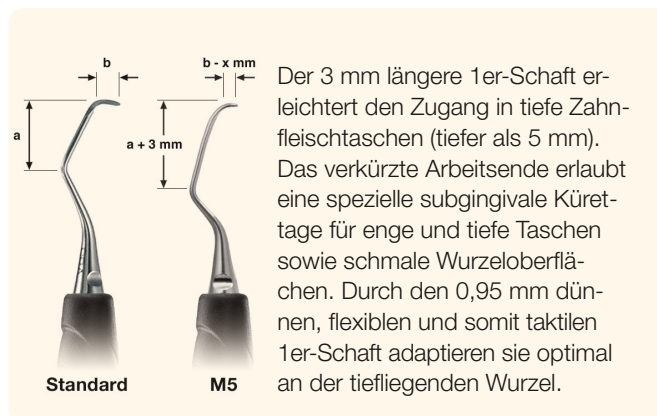


Langer M5 Universal-Küretten mit nanopal®-Beschichtung

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die schwarz beschichteten **ZEPF nanopal®**-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte Oberfläche, die in ihrer kristallinen Nanostruktur sehr aggressiv und scharfkantig ist. Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekannte **4500 Vickers** erhöht.

Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht nach jeder Kürettage geschärft zu werden.

Die schwarze, kratz feste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen.

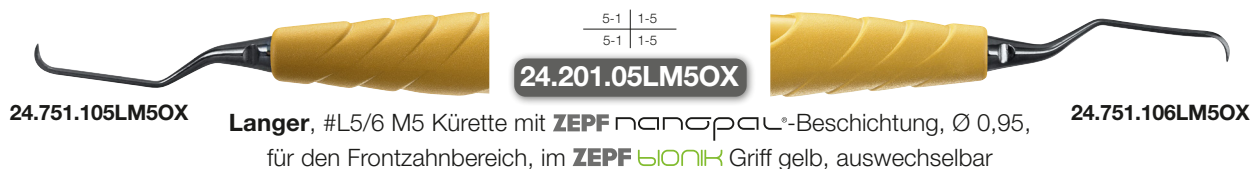

Langer Universal-Küretten, feine Ausführung

im **ZEPF BIONIK** Griff

Analog zu den Standard Langer Universal-Küretten haben auch die feinen Ausführungen zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an den Zahnhälsen.




24.751.105LF

24.201.05LF

24.751.106LF

Langer, #L5/6 Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar

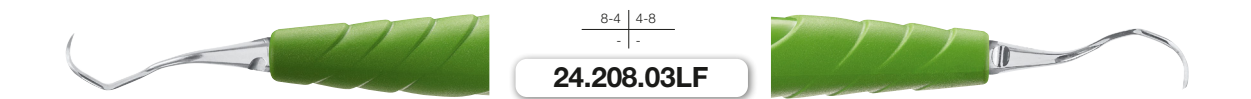


24.751.103LF

24.208.03LF

24.751.104LF

Langer, #L3/4 Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar

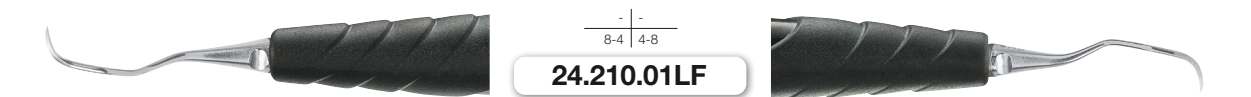

24.751.101LF

24.210.01LF

24.751.102LF

Langer, #L1/2 Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar




Langer Universal-Küretten, feine Ausführung mit nanopal®-Beschichtung

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die schwarz beschichteten **ZEPF nanopal®**-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte Oberfläche, die in ihrer kristallinen Nanostruktur sehr aggressiv und scharfkantig ist. Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekannte **4500 Vickers** erhöht.

Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht nach jeder Kürettage geschärft zu werden.

Die schwarze, kratzfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen.

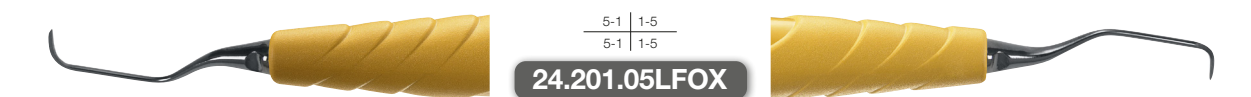


24.751.105LFOX

24.201.05LFOX

24.751.106LFOX

Langer, #L5/6 Universal-Kürette mit nanopal®-Beschichtung, feine Ausführung, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, auswechselbar

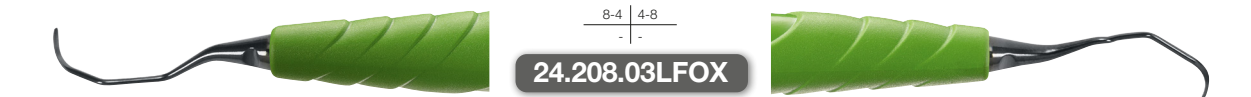


24.751.103LFOX

24.208.03LFOX

24.751.104LFOX

Langer, #L3/4 Universal-Kürette mit nanopal®-Beschichtung, feine Ausführung, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, auswechselbar

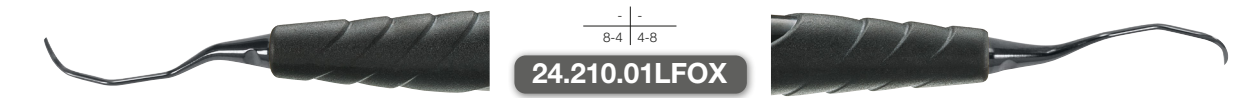

24.751.101LFOX

24.210.01LFOX

24.751.102LFOX

Langer, #L1/2 Universal-Kürette mit nanopal®-Beschichtung, feine Ausführung, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, auswechselbar