

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

Palatinales Messer – Bindegewebestransplantate –
sicher, schnell, effektiv!

nach Dr. med. dent. Iman Mizani, MS



ZEPF | *dental*
newsticker

Palatinales Messer

nach Dr. med. dent. Iman Mizani, MS

Das neuartige palatinale Messer bietet eine innovative Alternative zum herkömmlichen Skalpell bei der Präparation des BGT (Bindegewebe-transplantat).

Das spezielle Design des Instrumentes begünstigt eine schnellere und sicherere Transplantatentnahme.

Gleichzeitig wird das Risiko der Verletzung der Arteria palatina und die Perforation des palatinalen Lappens minimiert.


Besonderheiten:

- abgewinkelte Schneidekante, senkrecht zum palatinalen Knochen
- ergonomisch, gewinkelter Instrumentenhals /-schaft
- Tiefenmesslehre (Graduierung) zur genauen Abmessung

Vorteile gegenüber herkömmlicher Entnahmemethoden:

- erhöhte Sicherheit durch vermindertes Risiko der Verletzung der Gaumen-Arterie und Perforation der Gaumenschleimhaut
- einfache und ergonomische Handhabung
- schnelle, exakte Präparation des Transplantats
- durchgängig gleichmäßige Breite des BGT
- unterminierendes Arbeiten und Schneiden in schwer zu erreichenden Stellen


Anwendung:

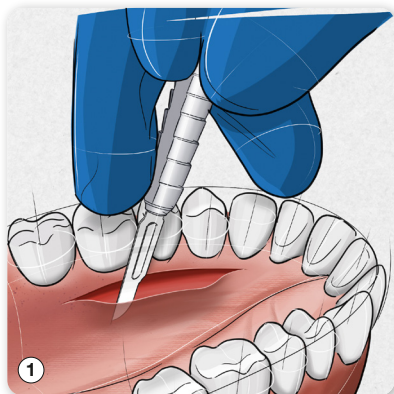

① Singuläre palatinale Inzision und Lappenbildung



② Präparation zu BG-Gewinnung anhand des Instruments

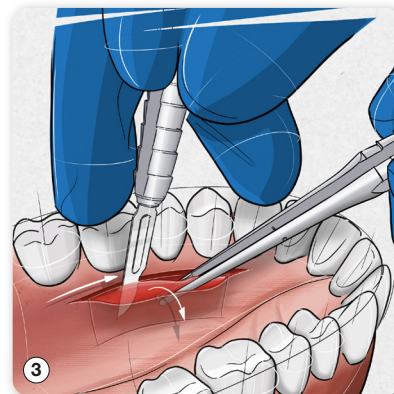

③ Umschneidung des präparierten Bindegewebes unterhalb des Lappens und Entnahme des Bindegewebes nach Ablösung der Basis vom palatinalen Knochen



46.040.15

Palatinales Messer
nach Dr. med. dent. Iman Mizani, MS

