

# Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

## ZEPF Bone-Scraper II

In der oralen Chirurgie werden Knochenersatz- und Knochenaufbaumaterialien bei Augmentationen oftmals mit autogenen Knochenspänen kombiniert.

Der Bone Scraper ist ein ideales Instrument zur einfachen und schnellen Gewinnung autologen Knochenmaterials. Er dient zum Schaben, Sammeln und Transplantieren von Eigenknochen.

Durch den Einsatz der Bone-Scraper kann auf Instrumente wie Knochenfilter, Trepanbohrer, Sägen und Knochenmühlen verzichtet werden. Seine Klingen ermöglichen die Gewinnung kortikalen und spongösen Knochens.

Während des Schabens wird der Knochen in einer Kammer gesammelt und gleichzeitig mit Blut vermischt. Das Knochenmaterial kann aus dem zuvor sterilisierten Bone-Scraper direkt implantiert werden. Mit der kostengünstigen Einwegklinge hat der Behandler stets ein scharfes und ergiebiges Instrument zur Verfügung.

### Wesentliche Vorteile:

- ergonomisch perfekt
- einfache Reinigung
- schnell auswechselbare Einwegklinge
- einfache Anwendung
- kostengünstig



### Ersatzteile:

#### Einwegklinge

47.957.30

VPE 3 Stück

47.957.50

VPE 5 Stück

#### Überwurfhülse

47.957.70


#### Griff ZEPF-Design

47.957.60

gerade Version

47.957.65

angulierte Version

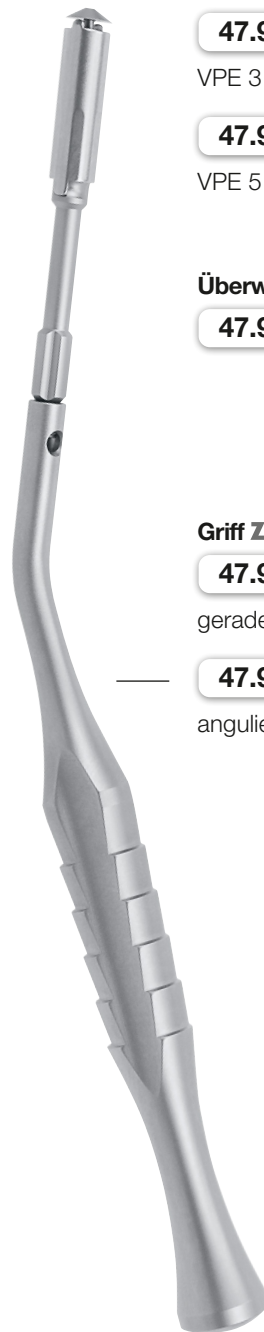

#### Bone-Scraper II

47.957.15

angulierte Version

ZEPF-Design, mit Überwurfhülse und Einwegklinge, M 1:1




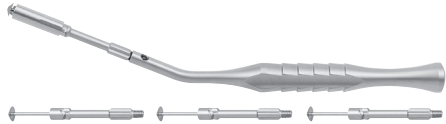







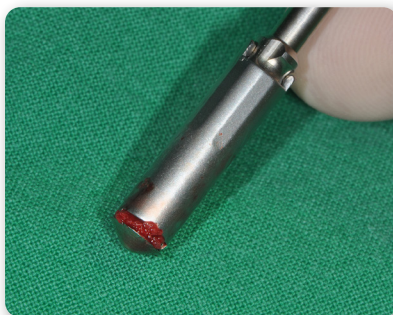
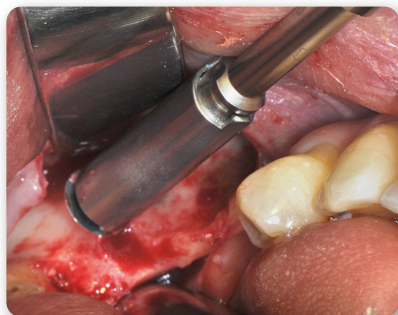
47.957.10

gerade Version



**ZEPF** | dental  
newsticker

Abbildung	Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	<b>47.957.10</b> Bone-Scraper II gerade, Ø 6 mm mit Überwurfhülse und einer Klinge, <b>ZEPF</b> -Design	1 Stück
	<b>47.957.15</b> Bone-Scraper II anguliert, Ø 6 mm mit Überwurfhülse und einer Klinge, <b>ZEPF</b> -Design	1 Stück
	<b>47.957.20</b> Bone-Scraper II gerade, Ø 6 mm, mit Hülse und Klinge Ø 6 mm, inkl. 3 Ersatzklingen	1 Set
	<b>47.957.25</b> Bone-Scraper II anguliert, Ø 6 mm, mit Hülse und Klinge Ø 6 mm, inkl. 3 Ersatzklingen	1 Set
<b>Ersatzteile für Bone-Scraper II</b>		
	<b>47.957.30</b> 3 Ersatzklingen, rund, Ø 6 mm, plus eine Ersatzhülse	1 Set
	<b>47.957.50</b> 5 Ersatzklingen, rund, Ø 6 mm, plus eine Ersatzhülse	1 Set
	<b>47.957.60</b> Griff gerade, <b>ZEPF</b> -Design	1 Stück
	<b>47.957.65</b> Griff anguliert, <b>ZEPF</b> -Design	1 Stück
	<b>47.957.70</b> Hülse für Bone-Scraper II	1 Stück



AESTHETIC IS THE RESULT