


Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

Augmentation Kit

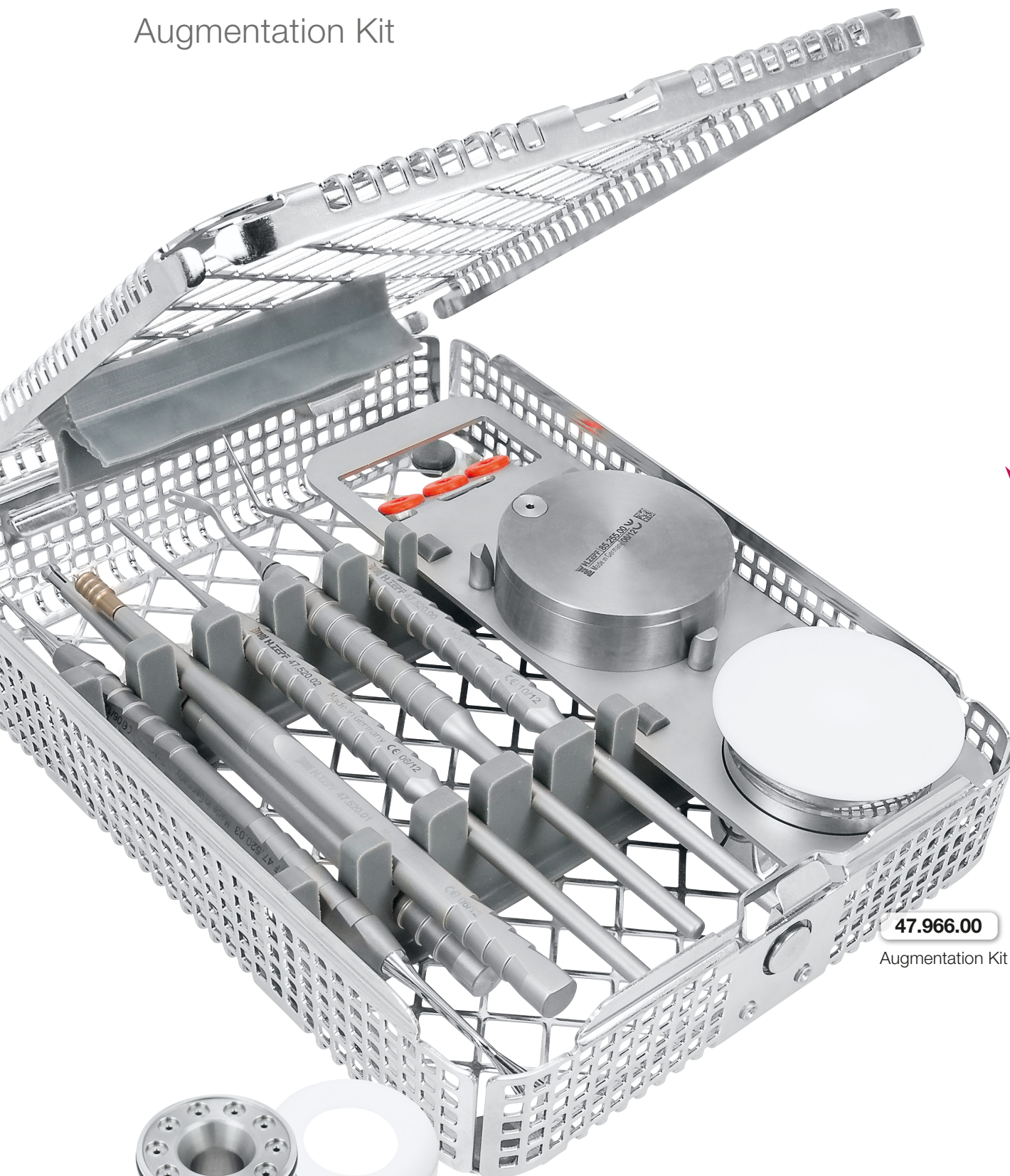

47.966.00

Augmentation Kit



85.255.02

Aufbewahrungsbox für
10 Titan-Pins, optional



ZEPF | *dental*
newsticker

Augmentation Kit

Die Indikation zur Alveolarkammrekonstruktion ergibt sich oft aufgrund von Defekten im Kieferkambereich.

Die häufigsten Ursachen sind Alveolarkammatrophie und Extraktionsdefekte.

Diese Defekte müssen im sichtbaren Bereich schon aus ästhetischen Gründen rekonstruiert werden.

Nach erfolgter Augmentation (mit autologem Knochen oder Knochenersatzmaterial) wird der Aufbau mit einer

Membrane abgedeckt. Um ein Verlagern des Augmentats unter der Membran zu verhindern, wird diese mit mindestens 2 Pins fixiert.

Die Titan-Pins mit 3 mm oder 5 mm Länge werden mit Hilfe des Applikators aus der Aufbewahrungsbox entnommen und durch die Folie oder Membrane in den Knochen eingedrückt.

Abbildung



Artikelbeschreibung

47.966.00

Augmentation Kit, bestehend aus:
Pin-Membransonde, Pin-Applikator,
Perforationsinstrument, Sinus 7 Instrument,
Titan-Pin 3 mm (10 Stk.), Titan-Pin 5 mm (5 Stk.),
Sinuselevator # 2, Anmischbecher, Pin Aufbewahrungsbox, 1/2 Waschkorb mit Deckel 85.194.15

Bestellmenge

1 Set



47.520.00

Pin-Membransonde mit Griff im **ZEPF**-Design

1 Stück



47.520.01

Pin-Applikator

1 Stück



47.520.02

Perforationsinstrument

1 Stück



47.520.03

Sinus 7 nach Kirsch,
Löffel Ø 6,0 mm / Stopfer biegsam Ø 5,0 mm

1 Stück



47.560.03

Titan-Pin, 3 mm (10 Stück im Set enthalten)

5 Stück



47.560.05

Titan-Pin, 5 mm (5 Stück im Set enthalten)

5 Stück



47.847.12

Pin Remove, zum Entfernen von Membrannägeln

1 Stück



85.251.04

Anmischbecher inkl. Deckel aus POM, Ø 4 cm

1 Stück



85.256.00

Aufbewahrungsbox für 5 Weichgewebspins
und 10 Titan-Pins

1 Stück

