


Extracción del diente 24 con fractura coronal.  
Extraction of the tooth 2.4 with a crown fracture..



**Utilizando la fresa Gates-Glidden retiramos la gutapercha del conducto radicular.**

**With the use of Gates-Glidden drills we remove the gutta-percha out of the root canal.**

Con la fresa Benex conformamos el conducto radicular.  
The Benex bur makes a preparation of the root canal.

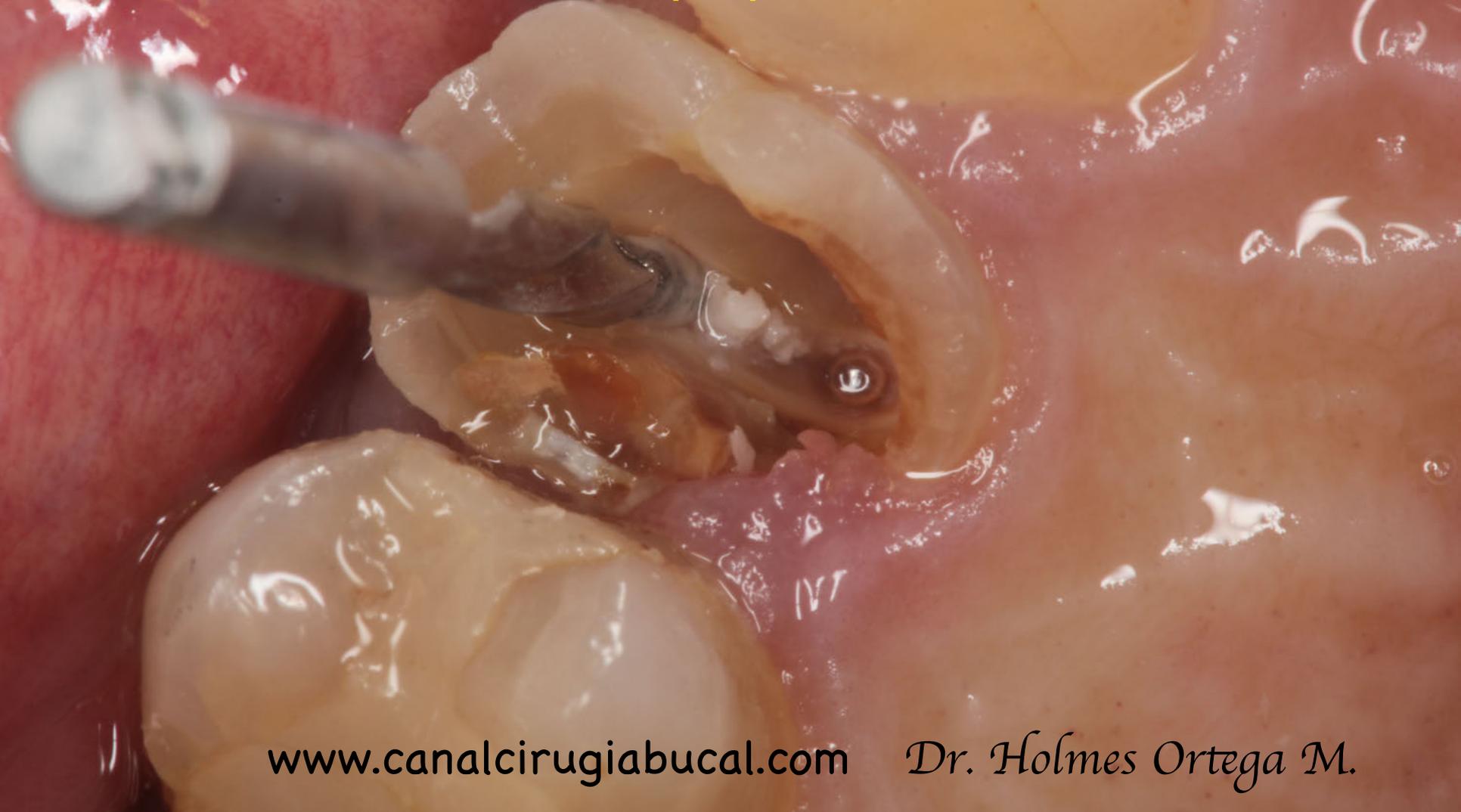

Se observan los conductos conformados.  
Here we notice the canal ready for the extractor.






Colocamos silicona pesada en la cubeta de soporte y se deja la ventana abierta.

We place silicone into the support and leave a hole for the extractor.

Insertamos el tornillo extractor con el destornillador.  
We insert the screw with the help of the screwdriver.

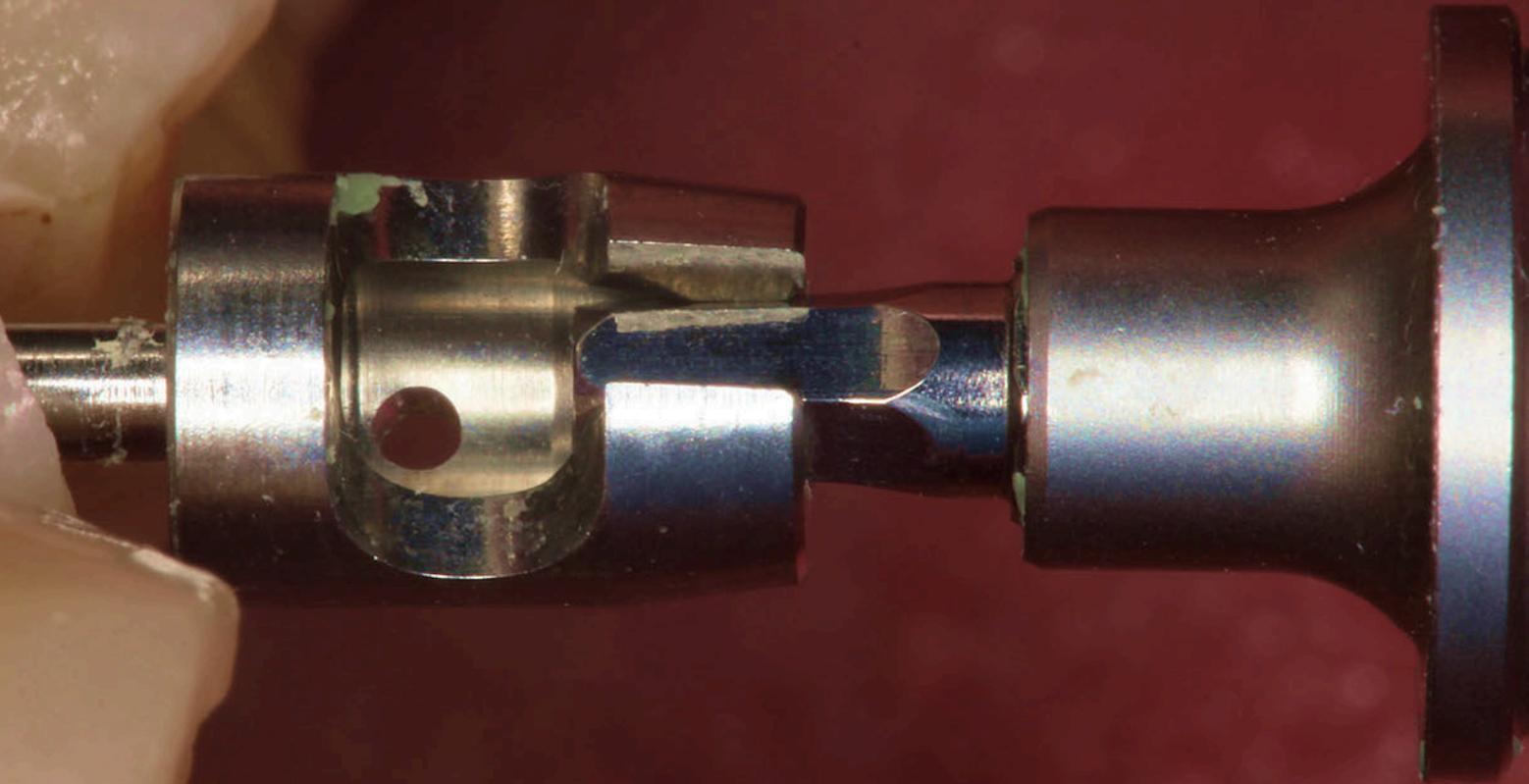

[www.canalcirugiabucal.com](http://www.canalcirugiabucal.com)

*Dr. Holmes Ortega M.*

Se coloca la línea metálica y ajustamos el extractor.  
Placing the pull-rope and adjusting the extractor.



Se extrae el diente progresivamente  
The tooth is extracted progressively.



Extracción del premolar con tres raíces  
Extraction of the bicuspid with three roots.



[www.canalcirugiabucal.com](http://www.canalcirugiabucal.com) Dr. Holmes Ortega M.

[www.canalcirugiabucal.com](http://www.canalcirugiabucal.com)

*Dr. Holmes Ortega M.*

